



LUXOR 2
True Nature

Multicamadas **ZrO₂**
é coisa do passado!

No antigo Egito, **Nefertiti** já era venerada por sua beleza. E ainda hoje o segredo por trás de sua qualidade natural é um enigma para a humanidade. Como nossa referência, Nefertiti representa a aspiração por alta qualidade aliada a uma estética superior. E assim nasceu Luxor Z True Nature, para facilitar a obtenção de uma **beleza natural** no âmbito da estética da prótese dentária.

Beleza natural – a arte que nos une


True Nature é a nossa contribuição, que permite às suas mãos qualificadas dar forma à individualidade e a um resultado artístico. Conheça um estilo de design com liberdade ilimitada.

A tecnologia de gradiente natural possibilita **gradientes únicos** em **todas as 3 categorias!**

Gradientes naturais, genuínos, contínuos de:

- Cor
- Translucidez
- Consistência

Sem demoras
Sem limitação das indicações

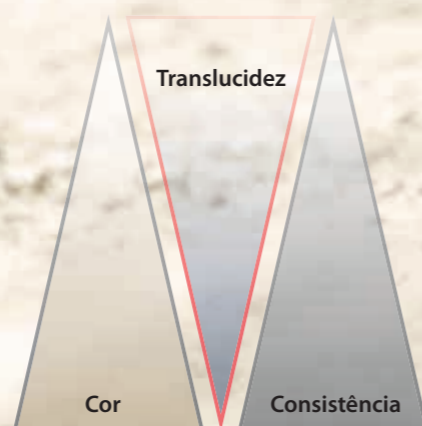

Multicamadas ZrO_2 é coisa do passado!

Luxor Z True Nature consiste no desenvolvimento continuado das camadas de zircônio. Ele dissolve as camadas, servindo para todas as indicações, e convence pelas seguintes propriedades:

- **Perfeitas** gradações de cor, consistência e translucidez
- **Resistência à flexão** de ≥ 1100 MPa na região cervical e ≥ 750 MPa na região incisal superior
- **Translucidez natural**, que corresponde aos valores de mercado medidos entre 40 - 45% cervical* e 50 - 55% incisal*.
- Máxima liberdade, pois está disponível nas cores **clássicas A1-D4** e **Bleach**, e em **7 níveis** respectivamente.

LUXOR
True Nature

* dependendo da cor dos dentes.

Conheça a sutileza na diferença

Após a sinterização, você obtém **uma opacidade de qualidade pura** na região cervical, que flui num gradiente de translucidez natural. A translucidez atinge na região incisal valores nunca alcançados pelos materiais sem limitação das indicações.


Os seus requisitos – A nossa missão

Saiba desde o início como o efeito opala e a gradação de cor alcançam as clássicas cores **VITA A1-D4** e **Bleach**. Muitas vezes, simplesmente queimar o esmalte é suficiente para obter um efeito natural de elevada qualidade. Deste modo, True Nature elimina por completo os fatores de conflito entre o requisito estético e uma orientação econômica em vista do resultado.



Luxor Z True Nature A1-A4:
Gradiente de translucidez
na luz transmitida

Luxor Z True Nature A1-A4:
Gradiente de cor na luz natural

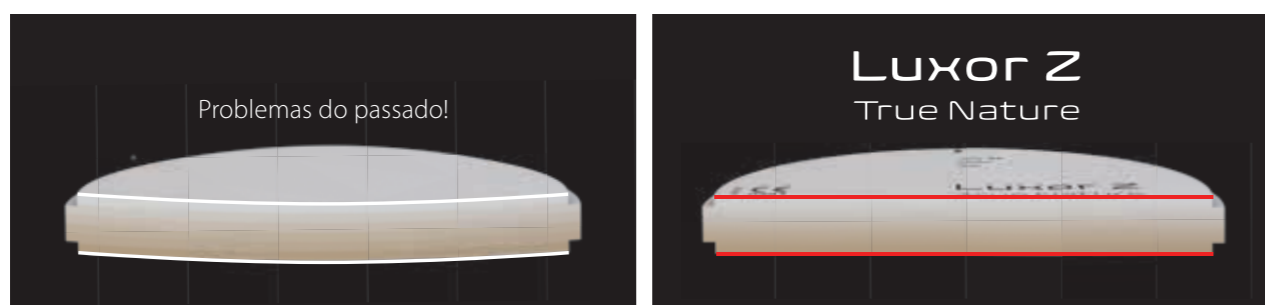

Acima: © ZTM Eugen Ens, Konstanz, Alemanha

A mais recente geração de materiais oferece uma reatividade de **sinterização equilibrada!**

Processo de produção "made by bredent group"

Num processo de produção especialmente desenvolvido ("Natural Gradient Technology"), cada peça em bruto é submetida a uma prensagem isostática individual e, assim, enobrecida. O processo de prensagem homogêneo garante a **extrema densidade**, que assegura uma impressionante **resistência à flexão** no acabamento final. De coroas individuais monolíticas estéticas na zona dentária frontal a restaurações de pontes monolíticas de grande extensão e restaurações de ponte completa – **não há limites**.

O avanço para a mais nova geração

Em comparação com a tecnologia de multicamadas tradicional, Luxor Z True Nature não deforma. A mais nova (5.ª) geração de material original Tosoh® oferece em conjunto com a tecnologia de produção especialmente desenvolvida uma reatividade de **sinterização equilibrada** com todos os componentes em pó contidos. Consequentemente o seu trabalho é feito sem demoras, obtendo uma estética ideal – e isso também nas restaurações de ponte completa ("Full Arch").

Extrema estabilidade das bordas

O complexo processo de produção garante excelente estabilidade das bordas, permite uma **capacidade de sinterização sem demoras** e otimiza ainda a Tecnologia de Gradiente Natural. Assim, em cada ponto dentro da peça em bruto ("Blank"), você obtém extremidades finas e **bordas nítidas e precisas.**


Menos etapas de trabalho – mais tempo

Você pode selecionar entre **sete níveis**, o que oferece uma série de opções em termos de posicionamento do seu trabalho. Assim, você obtém resultados estéticos naturais após o processo de fresagem e sinterização. Graças à relação corte/dentina em perfeita harmonia, você obtém **resultados de cor precisos.**





Extremidades finas – bordas fortes.

Bordas com Luxor Z True Nature.

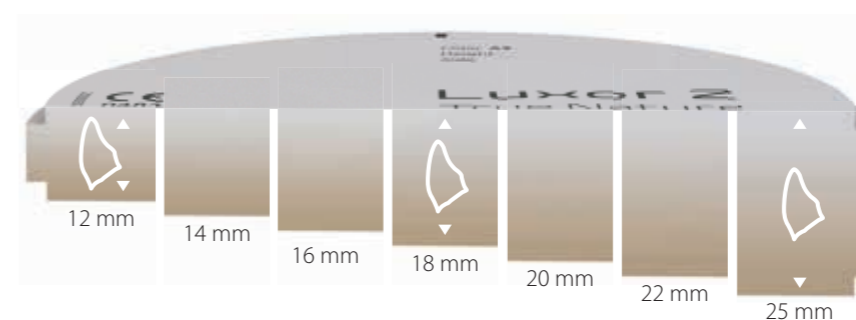

Grau máximo de liberdade em termos de nesting e controle de cores

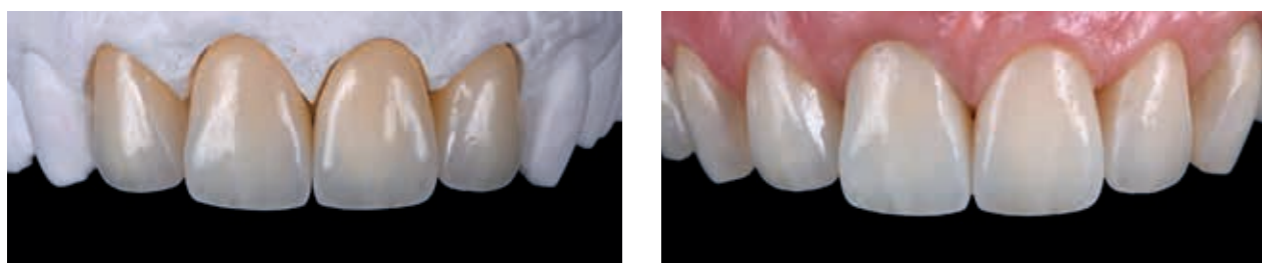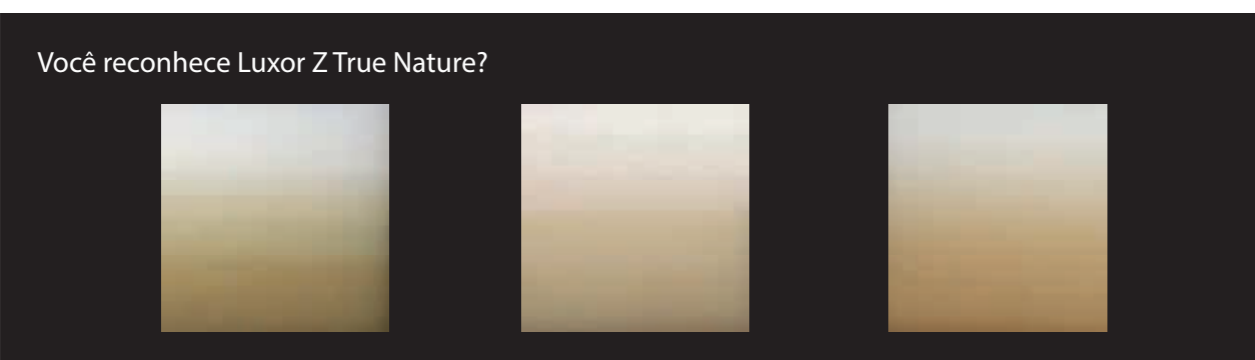

Acima: Comparação dos materiais (Shofu, White Peaks, Luxor Z True Nature)

Abaixo: © Dr. Vincenzo Musella e Dr. Stefano Marchi, Itália.

Multicamadas é coisa do passado!

Crie os seus trabalhos com a mais recente tecnologia e qualidade de material. Luxor Z True Nature baseia-se nos princípios da tecnologia de camadas da arte tradicional.

Por isso, Luxor Z True Nature permite:

- **Opacidade** na região cervical (para você cobrir tocos desvitalizados ou pilares)
- Mais profundidade, translucidez e estética para o **correto efeito de cor**
- Um **acabamento** radiante e **natural** na região incisal.

LUXOR Z


Frame

Eficiência graças a uma liberdade não restrita a indicações

A tabela seguinte mostra como com apenas dois produtos (True Nature e Frame) você consegue abranger todo o espectro. Desfrute de um estoque mais favorável, de uma baixa percentagem de erro e de manuseio mais confortável e simples.

Indicações	Luxor Z True Nature	Luxor Z Frame
Veneers, Inlays & Onlays	••	•
Coroa completamente anatômica	••	•
Ponte completamente anatômica (máx. 2 elos de ponte)	••	•
Aparafusamento oclusal Restauração de contorno completo (All-on-4)	••	•
Pilares sobre base aderente	•	••
Ponte revestida (até, no máx., 2 elos de ponte)	•	••
Telescópio/Capa	•	••

• = adequado •• = mais adequado

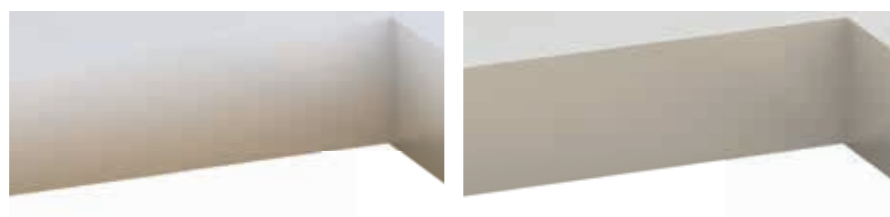

A base para a **beleza individual!**

Luxor Z Frame é fabricado de acordo com o mesmo processo de produção do True Nature e oferece os mesmos graus de liberdade e de segurança:

- Luxor Z Frame é **estável** (pré-coloração >1050 MPa e >1100 MPa na versão White), **não deforma** e oferece uma **excelente estabilidade nas bordas** – trabalhos posteriores são mínimos!
- Deixe a sua assinatura no seu trabalho – Luxor Z Frame pode ser sobreposto com **todos os materiais de cerâmica** disponíveis no mercado, como os materiais Stain & Glaze, que são adequados a óxido de zircônio.
- Luxor Z Frame White adequa-se de forma ideal para a pré-coloração à mão com cores Dip, para **máxima individualidade** nas suas mãos.
- Luxor Z True Nature & Frame satisfazem com **2 variantes** de um único produto **todos os requisitos** dos trabalhos em CAD/CAM orientados para a estética.



© Fer Griffon, Dtg, co-diretor do Esencia Dental Studio, Las Palmas, Espanha



© Sander Polanco, MDT, Staten Island, Estados Unidos da América

D00159 / 20220223 Salvo alterações técnicas.



 **DENTAL**
Concept Systems

Dental Concept Systems GmbH
Gieselwerder Str. 2
D - 34399 Wesertal

Telefon: + 49 (0) 5572 – 3021010
Fax: + 49 (0) 5572 – 3021099
www.dental-concept-systems.com

a company of
bredent group

Distribuído por: Dentaforyou Unipessoal Lda - Avenida das Agrads Nº 262 – Pavilhão C - 4820-748 Arões S. Romão | Fafe
E-Mail: a.vilhena@dentaforyou.pt | Telefone: (+351) 914 910 400