

LUXOR Z

True Nature

Многослойный диоксид
циркония (ZrO_2)
– вчерашний день!

Красоту Нефертити прославляли еще в древнем Египте. Секрет ее естественности люди пытаются разгадать по сей день. Для нас Нефертити является воплощением высоких требований к качеству и непревзойденной эстетичности. Так возникла технология Luxor Z True Nature, привносящая **естественную красоту** в сферу эстетического зубного протезирования.

True Nature — наша концепция

индивидуального подхода и искусного исполнения, которую мы вкладываем в ваши умелые руки. Откройте для себя безграничную свободу творчества.

технология Natural Gradient позволяет **получать уникальный** результат во **всех 3 категориях**

Естественность, реалистичность и плавная градация:

- цвета
- светопрозрачности
- прочности

без задержек и ограничений в показаниях



Многослойный диоксид циркония (ZrO_2)
- вчерашний день

Luxor Z True Nature — это усовершенствованный цирконий с растворенными слоями, который подходит для применения по любым показаниям и имеет следующие свойства:

- плавная градация цвета, прочности и светопрозрачности;
- прочность на изгиб ≥ 1100 МПа в области шейки и ≥ 750 МПа в области резцов
- естественная светопрозрачность, измеряемая в стандартных значениях в диапазоне от 40 - 45% в области шейки* до 50 - 55% в области резцов*
- максимальная свобода выбора благодаря классической палитре A1-D4, наличию цвета Bleach и 7 вариантов высоты

LUXOR
True Nature

* в зависимости от цвета зубов.

Почувствуйте разницу

После спекания в области шейки достигается полная непрозрачность с естественным переходом в светопрозрачность. Светопрозрачность в области резцов достигает значений, которые раньше были невозможны без ограничения показаний.

Ваши требования — наша задача


Обратите внимание, как можно с самого начала достичь опалового эффекта и классических оттенков цветов VITA A1-D4 и Bleach. Зачастую для создания высококачественного натурального эффекта достаточно простого обжига глазури. Благодаря этому True Nature позволяет полностью избежать поиска компромиссов между эстетическими требованиями и экономической стороной вопроса.



Luxor Z True Nature A1-A4:
Светопрозрачность в проходящем свете



Luxor Z True Nature A1-A4:
Изменение цвета в естественном свете

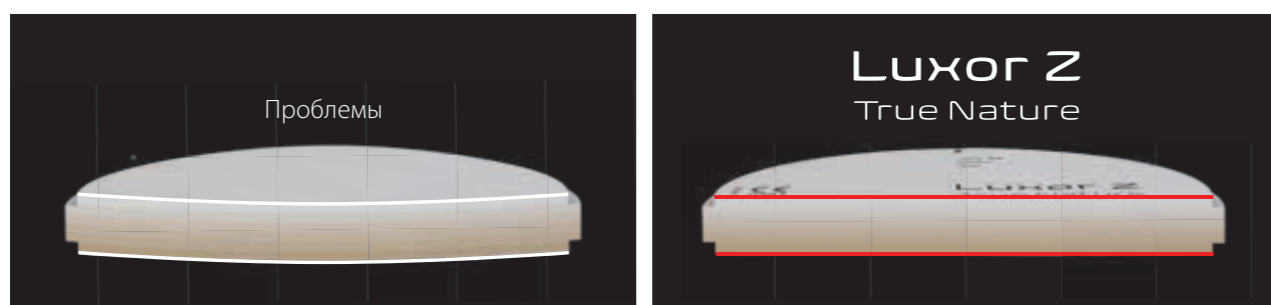

Вверху: © 3/т Ойген Энс, Констанц, Германия.

Новейшее поколение материалов обеспечивает сбалансированную **реакцию в процессе спекания!**

Производственный процесс bredent group

В ходе специально разработанного технологического процесса (Natural Gradient Technology) происходит изостатическое прессование и обработка каждой заготовки в отдельности. Однородный процесс прессования гарантирует чрезвычайную плотность, что обеспечивает превосходную прочность на изгиб на заключительном этапе работы. От эстетичных монолитных отдельных коронок в переднем отделе до больших монолитных мостовых конструкций и полнудговых протезов - никаких ограничений.

Прогресс благодаря новейшему поколению

По сравнению с традиционной многослойной технологией Luxor Z True Nature не подвержен перекосам. Новейшее (5-е) поколение исходного материала Tosoh® в сочетании со специально разработанной технологией производства обеспечивает сбалансированную реакцию спекания со всеми содержащимися в нем сыпучими компонентами. В результате вы без промедления получаете высокие эстетические характеристики, в том числе полнудговых протезов.

Исключительная стабильность кромок

Тщательный производственный процесс обеспечивает превосходную стабильность кромок, способствует спеканию без перекосов и гарантирует дополнительную оптимизацию благодаря технологии Natural Gradient. Благодаря этому вы можете рассчитывать на тонкие края и точные контуры кромок в каждой точке заготовки.


Меньше этапов работы - больше времени

Вы можете выбрать один из семи вариантов высоты, которые открывают новые возможности при размещении протеза. Таким образом, после фрезерования и спекания вы, без сомнения, получите естественный и эстетичный результат. Идеально сбалансированное соотношение режущей кромки и дентина гарантирует получение точного цвета.




Тонкие края — прочные кромки!


Кромки с Luxor Z True Nature

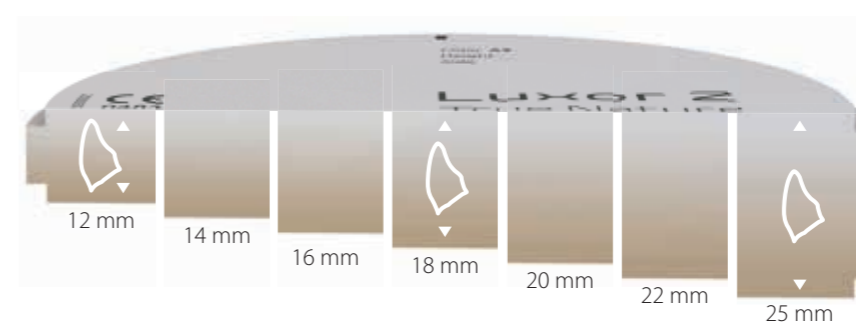

Максимальная степень свободы при установке и корректировке цвета

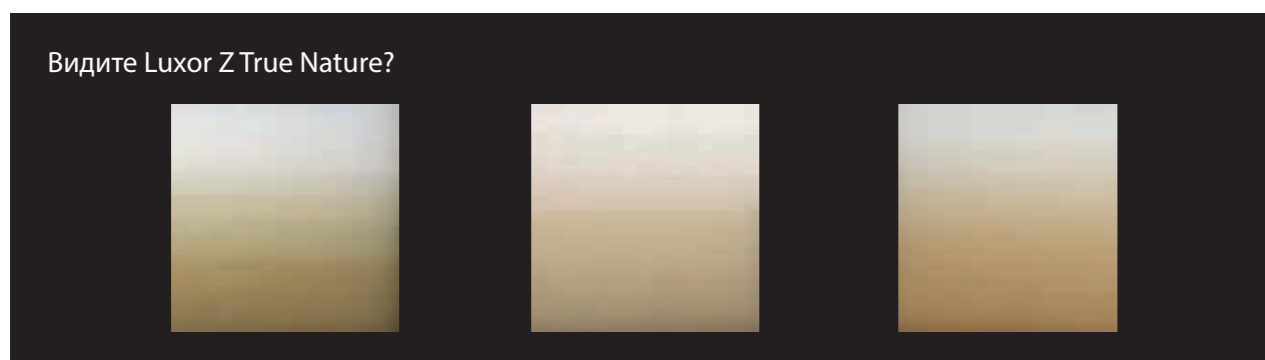

Видите Luxor Z True Nature?

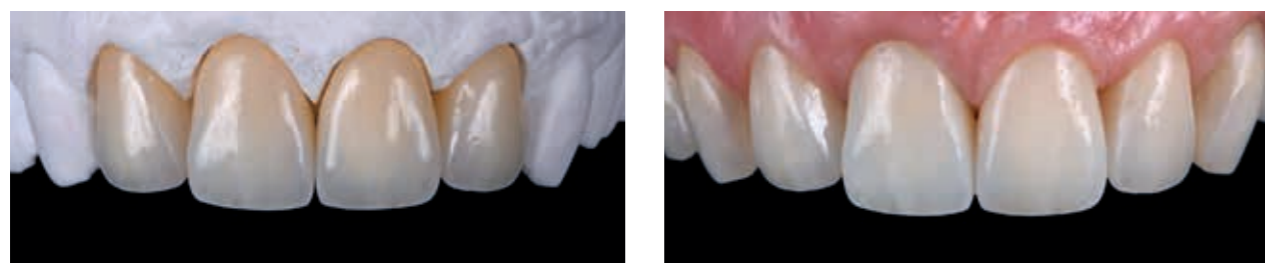

Вверху – сравнение материалов (слева направо): Shofu, White Peaks, Luxor Z True Nature)

внизу: © доктор Винченцо Муселла и др. Стефано Марчи, Италия.

Многослойный диоксид циркония — вчерашний день!

Используйте новейшие технологии и материалы, чтобы достичь наивысшего качества работы. В технологии Luxor Z True Nature используются принципы техники нанесения слоев из области традиционного ремесленного искусства.

Благодаря этому Luxor Z True Nature отличается следующими преимуществами:

- непрозрачность в области шейки (что позволяет закрыть мертвую культю или абатменты)
- идеальная глубина, светопроницаемость и эстетичность для получения нужного цветового эффекта
- живая и естественная чистовая обработка в области резцов.


Luxor Z Frame

Эффективность за счет отсутствия показаний

В таблице ниже показано, как с помощью всего двух продуктов (True Nature и Frame) можно охватить весь спектр. Воспользуйтесь такими преимуществами, как снижение затрат на складское хранение, уменьшение количества ошибок, повышение удобства и ясности в обращении.

показания	Luxor Z True Nature	Luxor Z Frame
Виниры, вкладки и накладки	••	•
Полностью анатомическая коронка	••	•
Полностью анатомический мост (до 2 сегментов)	••	•
Полная реставрация контура с окклюзионной винтовой фиксацией	••	•
Абатменты на клеевой основе	•	••
Заглушка (до 2 сегментов)	•	••
Телескопическая головка/заглушка	•	••

• = подходит •• = идеально подходит

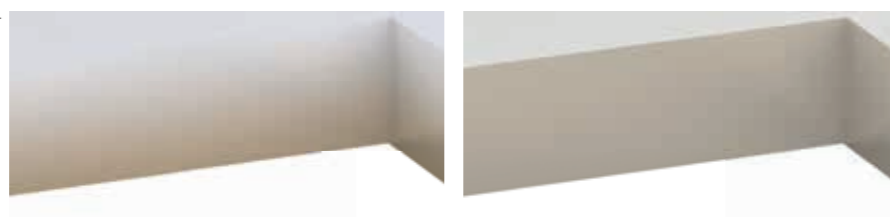

Основа индивидуальной красоты!

Для Luxor Z Frame используется та же технология производства, что и для True Nature. Это обеспечивает аналогичную свободу и безопасность.

- Luxor Z Frame отличается прочностью (>1050 МПа при предварительном окрашивании и >1100 МПа в белом исполнении), отсутствием перекосов и превосходной стабильностью кромок — необходима лишь минимальная дополнительная обработка!
- Придайте своей работе собственный стиль — для нанесения покрытия на Luxor Z Frame можно использовать все виды стандартной керамики для обжига, а также массы Stain & Glaze для оксида циркония.
- Luxor Z Frame White идеально подходит для предварительного окрашивания погружением и максимальной адаптации результата.
- Luxor Z True Nature и Frame представляют собой 2 варианта одного изделия, способные удовлетворить все ваши требования в ходе выполнения эстетических работ CAD/CAM.



© Фер Грифон, содиректор Esencia Dental Studio, Лас-Пальмас, Испания.



© Сандер Поланко, MDT, Статен-Айленд, США.



Просто оформите заказ по электронной
почте или телефону:

customerservice.DCS@bredent.com


+49 (0) 73 09 / 8 72 - 441



Онлайн-поддержка CAD/CAM:
dental-concept-systems.com/support



Партнеры по сбыту:

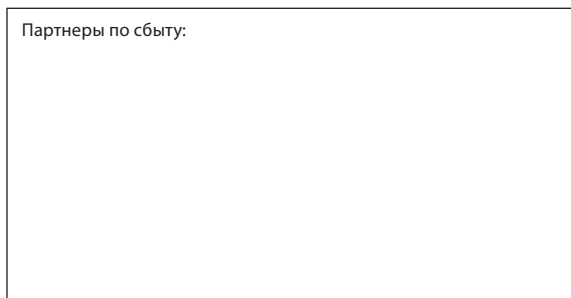

 **DENTAL**
Concept Systems

Dental Concept Systems GmbH
Gieselwerder Str. 2
D - 34399 Wesertal (Германия)

Teléfono: + 49 (0) 5572 – 3021010
Fax: + 49 (0) 5572 – 3021099
www.dental-concept-systems.com

a company of
bredent group