

LUXOR 2

True Nature

Multicamadas ZrO_2
é coisa do passado!

No antigo Egito, **Nefertiti** já era venerada por sua beleza. E ainda hoje o segredo por trás de sua qualidade natural é um enigma para a humanidade. Como nossa referência, Nefertiti representa a aspiração por alta qualidade aliada a uma estética superior. Foi assim que Luxor Z True Nature nasceu, um produto que facilita a criação de uma **beleza natural** no âmbito da estética da prótese dentária.

Beleza natural – o nosso objetivo comum


True Nature é a nossa contribuição, onde oferecemos a oportunidade de personalizar as suas restaurações e demonstrar o seu resultado artístico.

A nossa tecnologia de gradiente natural proporciona **gradientes únicos** em **todas as 3 categorias!**

Gradientes naturais, genuínos, contínuos de:

- Cor
- Translucidez
- Consistência

Sem demoras
Sem limitação das indicações

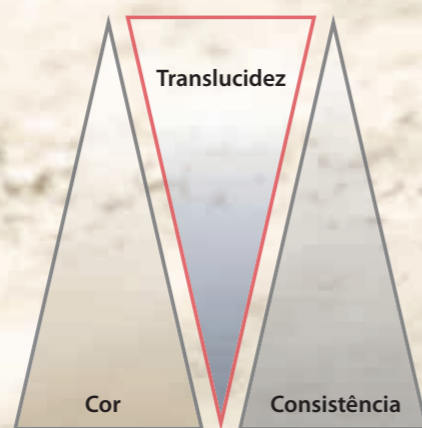

Multicamadas ZrO_2 pertence ao passado.

Luxor Z True Nature é um material em zircónio recentemente desenvolvido que eliminou as camadas. É adequado para todas as indicações e tem as seguintes propriedades:

- **Perfeitas** gradações de cor, consistência e translucidez
- **Resistência à flexão** de ≥ 1100 MPa na região cervical e ≥ 750 MPa na região incisal
- **Translucidez natural**, que corresponde aos valores de mercado medidos entre 40 - 45% cervical* e 50 - 55% incisal*.
- Máxima flexibilidade pois Luxor Z True Nature and Frame estão disponíveis nos 7 níveis através da gama de sombras VITA clássica A1-D4® mais branqueamento.

LUXOR
True Nature

* dependendo da cor dos dentes.

Conheça a sutileza na diferença

Após a sinterização, você obtém **uma opacidade de qualidade pura** na região cervical, que flui num gradiente de translucidez natural. A translucidez atinge na região incisal valores nunca alcançados pelos materiais sem limitação das indicações.

Os seus requisitos – A nossa missão


Saiba desde o início como o efeito opala e a gradação de cor alcançam as clássicas cores **VITA A1-D4** e **Bleach**. Muitas vezes, simplesmente queimar o esmalte é suficiente para obter um efeito natural de elevada qualidade. Deste modo, True Nature atinge um equilíbrio exato entre as prioridades das expectativas estéticas e a necessidade de eficiência.



Luxor Z True Nature A1-A4:
Gradiente de translucidez
na luz transmitida



Luxor Z True Nature A1-A4:
Gradiente de cor na luz natural

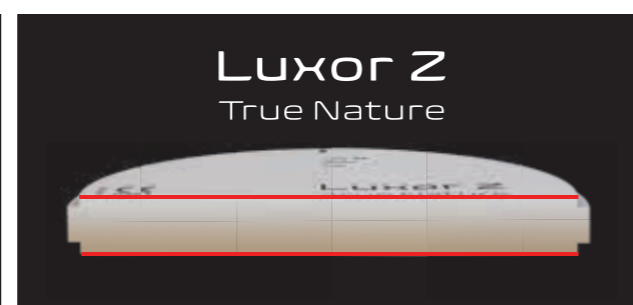

Acima: © ZTM Eugen Ens, Konstanz, Alemanha

A mais recente geração de materiais oferece uma reatividade de **sinterização equilibrada!**

Processo de produção “made by bredent group”

Com o nosso processo Natural Gradient Technology especialmente desenvolvido, cada peça em bruto é submetida a uma prensagem isostática individual e enobrecida. O processo de prensagem homogêneo garante a **extrema densidade**, resultando numa impressionante **resistência à flexão** no acabamento final.

De coroas individuais monolíticas estéticas na zona dentária frontal a restaurações de pontes monolíticas de grande extensão e restaurações de ponte completa – **na estética não há limites.**

O avanço para a mais nova geração

Em comparação com a tecnologia de multicamadas tradicional, Luxor Z True Nature não deforma. A mais recente (5.ª) geração de material original Tosoh® oferece em conjunto com a nossa tecnologia de produção especialmente desenvolvida uma reatividade de **sinterização equilibrada** com todos os componentes em pó contidos que o Luxor Z contém. Consequentemente, pode obter resultados sem deformações, combinando uma estética elevada, mesmo nas restaurações de ponte completa.

Bordas extremamente resistentes

O nosso processo de produção melhorado garante excelente estabilidade das bordas, e ajuda a proporcionar distorção - uma **capacidade de sinterização enquanto** otimiza ainda a Tecnologia de Gradiente Natural. Resultando em extremidades finas e **bordas nítidas e precisas em toda a peça em bruto.**


Menos etapas de trabalho, mais tempo

Você pode selecionar entre **sete níveis**, o que oferece uma série de opções em termos de posicionamento do seu trabalho. Assim, você obtém resultados estéticos naturais após o processo de fresagem e sinterização. Graças à relação corte/dentina em perfeita harmonia, você obtém **resultados de cor precisos.**




Extremidades finas – bordas fortes.

Bordas com Luxor Z True Nature.

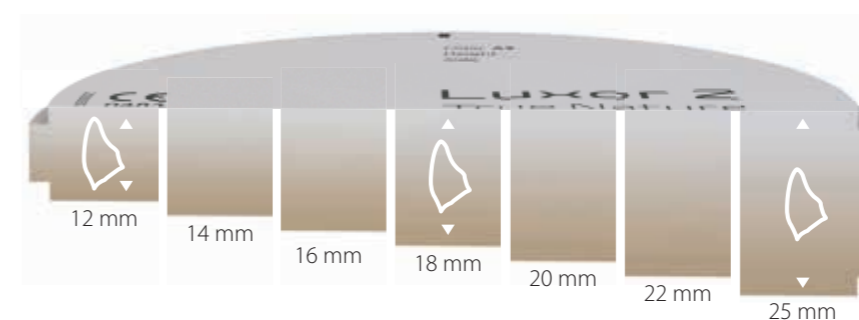

Grau máximo de liberdade em termos de nesting e controle de cores

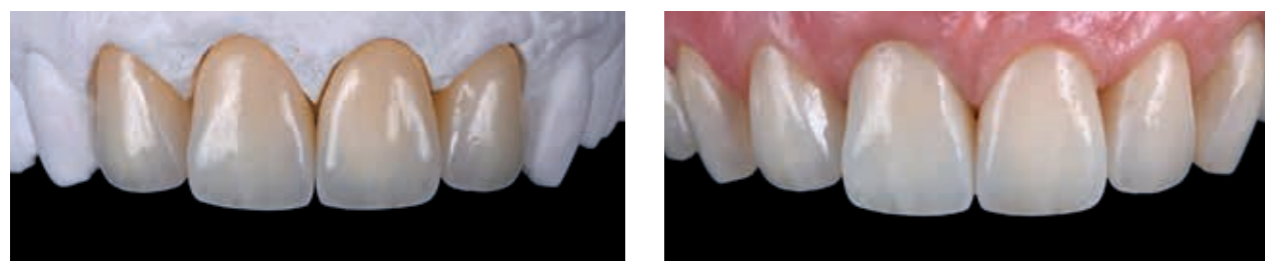

Acima: Comparação dos materiais

Abaixo: © Dr. Vincenzo Musella e Dr. Stefano Marchi, Itália.

Multicamadas pertence ao passado!

Crie os seus trabalhos com a mais recente tecnologia e qualidade de material. O nosso Luxor Z True Nature usa os princípios da tecnologia de camadas da arte tradicional.

Luxor Z True Nature proporciona:

- **Opacidade** na região cervical que ajuda a cobrir dentes desvitalizados ou pilares
- Mais profundidade e translucidez resultando em **estética natural**
- Um **acabamento vibrante natural** na região incisal.

LUXOR Z


Frame

Eficiência alta graças a uma ampla gama de indicações clínicas

A tabela seguinte mostra como com apenas dois produtos (True Nature e Frame) você consegue abranger todo o espectro. Desfrute de um estoque mais favorável, de uma baixa percentagem de erro e de manuseio mais confortável e simples.

Indicações	Luxor Z True Nature	Luxor Z Frame
Veneers, Inlays & Onlays	••	•
Coroa completamente anatômica	••	•
Ponte completamente anatômica (máx. 2 elos de ponte)	••	•
Aparafusamento oclusal Restauração de contorno completo (All-on-4)	••	•
Pilares sobre base aderente	•	••
Ponte revestida (até, no máx., 2 elos de ponte)	•	••
Telescópio/Capa	•	••

• = adequado •• = perfeito

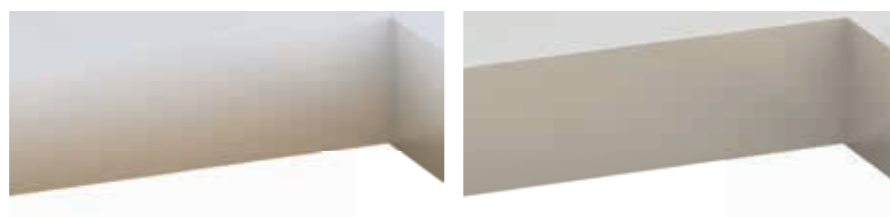

A base para a **beleza individual!**

Luxor Z Frame é criado usando o mesmo processo de tecnologia de gradiente natural (TGN) do True Nature, assegurando a mesma flexibilidade e confiabilidade:

- Luxor Z Frame é **estável** (pré-coloração >1050 MPa e >1100 MPa na versão White), **não deforma** e oferece uma **excelente estabilidade nas bordas** – levando a trabalhos posteriores mínimos.
- Deixe a sua assinatura no seu trabalho – Luxor Z Frame pode ser sobreposto com **todos os materiais de cerâmica** disponíveis no mercado, e os materiais Stain & Glaze, que são adequados a óxido de zircônio.
- Luxor Z Frame White é ideal para a pré-coloração usando cores Dip, dando **uma versatilidade máxima**.
- Conheça cada requisito estético para o seu trabalho em CAD/CAM com apenas dois produtos. Luxor Z True Nature e Luxor Z Frame.



© Fer Griffon, Dtg, co-diretor do Esencia Dental Studio, Las Palmas, Espanha



© Sander Polanco, MDT, Staten Island, Estados Unidos da América

D00159 / 20220711 Salvo alterações técnicas.



 **DENTAL**
Concept Systems

Dental Concept Systems GmbH
Gieselwerder Str. 2
D - 34399 Wesertal

Telefon: + 49 (0) 5572 – 3021010
Fax: + 49 (0) 5572 – 3021099
www.dental-concept-systems.com

a company of
bredent group

Distribuído por: Dentaforyou Unipessoal Lda - Avenida das Agradas Nº 262 – Pavilhão C - 4820-748 Arões S. Romão | Fafe
E-Mail: a.vilhena@dentaforyou.pt | Telefone: (+351) 914 910 400